

DAILIES™ AquaComfort™ PLUS

Produktprofil



Bei Astigmatismus

Bei Presbyopie

DAILIES™ AquaComfort™ PLUS

- Lidschlag-aktivierte Feuchtigkeit für einen erfrischenden, ganztägigen Tragekomfort – auch noch nach 16 Stunden²

DAILIES™ AquaComfort™ PLUS Toric

- PRECISION CURVE™ Linsendesign für herausragende Stabilität und scharfe, klare Sicht³
- Vielzahl an Parametern für eine hohe Versorgungsmöglichkeit

DAILIES™ AquaComfort™ PLUS Multifocal

- Bewährtes PRECISION PROFILE™ Design für effiziente Anpassung mit zuverlässig hoher Erfolgsquote^{1*}

* Mit zwei oder weniger Anpasslinsen pro Auge bei der Erstanpassung, basierend auf DAILIES TOTAL1™ Multifocal, DAILIES™ AquaComfort™ PLUS Multifocal, AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL.



DAILIES™ AquaComfort™ PLUS


Technologie und Material



Technologie

Lidschlag-aktivierte Benetzungstechnologie:

- Das Kontaktlinsenmaterial besteht aus vernetzten PVA-Ketten.¹
- Zusätzlich bewegt sich unvernetztes PVA frei in der Kontaktlinsenmatrix.¹
- Mit jedem Lidschlag wird unvernetztes PVA abgegeben¹, was zur Stabilisierung des Tränenfilms beiträgt.²

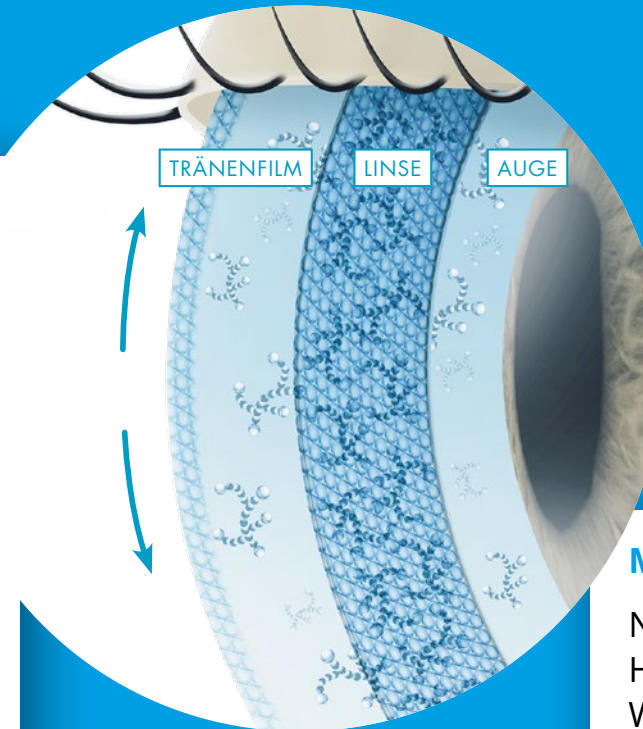

Material

Nelfilcon A, PVA (Polyvinylalkohol),
HEMA-frei, 3-Phasen-Feuchtigkeitskomplex
Wassergehalt: 69 %
Materialklasse: nicht ionisch (FDA, Gruppe II)
Dk-Wert: 26
Dk/t-Wert: 26



DAILIES™ AquaComfort™ PLUS Toric

Lieferprogramm



Bei Astigmatismus

DAILIES™ AquaComfort™ PLUS Toric

Art.-Typ	Verpackungseinheit	Basiskurve (mm)	Wirkungen (dpt)	Ø (mm)	Zylinder (dpt)	Achslagen (°)	Anpass-Satz
DAPT55	5er-Box*	8,8	-8,00 bis -6,50 (0,50-dpt-Schritte)	14,4	-0,75 -1,25 -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	Anpass-Satz (60 x 5er-Packs / 3 x 2 Schubladen) Maße: ca. 46,5 x 19 x 22,4 cm Art.-Nr.: 100049121
DAPT30	30er-Box						
DAPT90	90er-Box						

Alle Anpass-Sätze werden sortiert in den Schubladen geliefert.

* Anpasslinsen.

Hinweis: Geeignet für sphärische Fehlsichtigkeiten von +4,00 dpt bis -9,00 dpt bei HSA = 12 mm, in Abhängigkeit von der individuellen Anpassung, und torische Fehlsichtigkeiten bis Zyl. max. -2,50 dpt bei HSA = 12 mm.



DAILIES™ AquaComfort™ PLUS Toric

Produktspezifikationen und Anpassempfehlung



Spezifikationen

- **Flächengeometrie:** profiloptimiertes Multikurven-Design (= gleichmäßig dünnes, mehrkurviges Linsenprofil); Vorder- und Rückfläche: Multikurven-Design, dynamische Stabilisierung
- **Mittendicke:** 0,10 mm bei -3,00 dpt
- **Randdicke:** 0,076 mm (konstant in allen Stärken)
- **Äquivalente Basiskurve:** 8,8 mm
- **KL-Ø:** 14,4 mm
- **Ø optische Zone:** 7,5 – 7,6 mm (abhängig von der Linsenstärke)
- **Komfortbevel**
- **Gravur:** Markierung bei 3 und 9 Uhr, OK-Umstülpmarkierung
- **Handhabungstönung:** hellblau

Anpassempfehlung

- **KL-Wirkung:** Sph, Zyl, Achse anhand gemessener Refraktion (Angabe im Minuszylinder)
- Berücksichtigen Sie ggf. die HSA-Umrechnung für HSA = 0 mm.
- Rein sphärischer Feinabgleich: bei Visusabfall Stabilisationsrichtung überprüfen und ggf. nach LARS-Regel neue Kontaktlinsenachse bestimmen
- Für Fragen zur Anpassung steht Ihnen unsere Fachanpassberatung gerne zur Verfügung.

Bei Astigmatismus

Zentrierung/Bewegung

- DAILIES™ AquaComfort™ PLUS Toric zentrieren nach dem Aufsetzen über den Lidschlag.
- DAILIES™ AquaComfort™ PLUS Toric zeigen durch ihr Design ein sehr gutes Zentrierverhalten.
- Ein zentrischer Sitz sollte in allen Blickpositionen zu sehen sein.
- Die Minimalanforderung ist eine gleitende Bewegung bei Durchführung des „Push-up“-Tests.

